

2024-2162  
 2024-2163  
 2024-2164

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR

PROPUESTA INCLUSION	
BBRAUN MEDICAL	COSTE
CAJA	UNIDAD

PROVEEDOR

SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	1,55 €
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	4,00 €
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	4,95 €

VIGENCIA TARIFA 31/12/2024  
 PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC


05 UNITS

A rellenar por el centro, Marcar con una X si el Material Sanitario es NO facturable.			
	ADESLAS	DKV	SANITAS
Amb.			
Hosp.			

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.  
 Si el paciente es asegurado de entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad.  
 En caso que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradora Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

GRUPO: AF (Material fluidos y recogida muestras).  
 CLASE: AF06 (Accesorios).  
 CARACTERISTICAS: AF0607 (Conectores y racores).

Informe y/o Gestión realizada por:  
 Gara Fernandez Hernandez

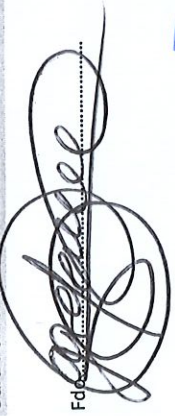Fdo: 

  
 Sandra 23/11/2024

**MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES**  
**PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN**

1. Nombre y referencia material: 823755 ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT **116-245250**

2. Nombre comercial: ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT **1352 100**  
**1'55**

3. Laboratorio: B. BRAUN

4. Presentación: CAJA DE 100 UNIDADES

5. Aplicación:  
MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS

6. Descripción del producto:  
SISTEMA CERRADO DE TRANSFERENCIA - ADAPTADOR JERINGA - VIAL

7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:  
LIMITAR LA EXPOSICIÓN DEL MANIPULADOR/A A MEDICAMENTOS PELIGROSOS

8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP:  
823755 ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT, ya se utiliza en Hospiten Rambla.


9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:  
No se dispone de ninguno en Hospiten Sur.


10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente?  
Ninguno.


A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA: 28-octubre-2024

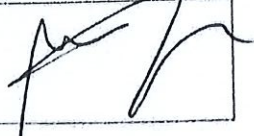DR./SERVICIO SOLICITANTE  
  
Fdo.: Dr.  
ANA I SOLER RODENAS

Director Gerente  
  
Fdo.:  
RAFAEL MARTINEZ ITURBE

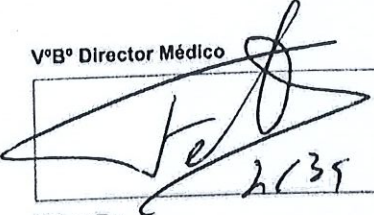VºBº Director Médico  
  
Fdo.: Dr.  
TOMAS FEBLES



**MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES**

**PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN**

1. Nombre y referencia material: 823755 ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT MG-245277

2. Nombre comercial: ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT 200 50

3. Laboratorio: B. BRAUN 4'00

4. Presentación: CAJA DE 50 UNIDADES

5. Aplicación:  
MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS

6. Descripción del producto:  
SISTEMA CERRADO DE TRANSFERENCIA - ADAPTADOR A JERINGA

7. Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:  
LIMITAR LA EXPOSICIÓN DEL MANIPULADOR/A A MEDICAMENTOS PELIGROSOS

8. Materiales de uso actual en Hospiten código SAP:  
823755 ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT, ya se utiliza en Hospiten Rambla.

9. Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:  
No se dispone de ninguno en Hospiten Sur.


10. ¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente?  
Ninguno.

A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA: 28-octubre-2024


DR./SERVICIO SOLICITANTE

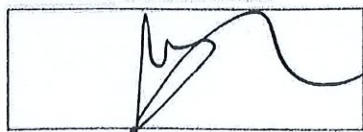

Fdo.: Dr.

ANA I SOLER RODENAS


Director Gerente

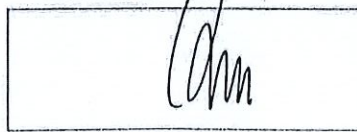

Fdo.:

RAFAEL MARTINEZ ITURBE

VºBº Director Médico

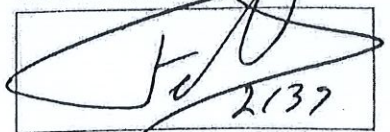

Fdo.:Dr.

TOMAS FEBLES

**MODELO 1. ADMISIÓN DE NUEVOS MATERIALES**

**PROPUESTA DE NUEVO MATERIAL HOSPITALARIO PARA SU INCLUSIÓN EN LA GUÍA HOSPITALARIA DE HOSPITEN**


1. **Nombre y referencia material:** 823747 ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM N6 - 245248
2. **Nombre comercial:** ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM 247'50 50
3. **Laboratorio:** B. BRAUN 4'95
4. **Presentación:** CAJA DE 50 UNIDADES
5. **Aplicación:**  
MANIPULACIÓN DE CITOSTÁTICOS
6. **Descripción del producto:**  
SISTEMA CERRADO DE TRANSFERENCIA - ADAPTADOR A VIAL
7. **Reséñese la acción diagnóstica/terapéutica principal y el uso terapéutico del material que justifique su inclusión:**  
LIMITAR LA EXPOSICIÓN DEL MANIPULADOR/A A MEDICAMENTOS PELIGROSOS
8. **Materiales de uso actual en Hospiten código SAP:**  
823747 ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM, ya se utiliza en Hospiten Rambla.
9. **Razones clínicas por las cuales este material es superior a los citados anteriormente:**  
No se dispone de ninguno en Hospiten Sur.
10. **¿Qué materiales considera usted podrían retirarse de la Guía reseñados anteriormente?**  
Ninguno.

A rellenar por el centro. Marcar con una x si el MATERIAL SANITARIO es NO facturable.

	Adeslas	DKV	Sanitas			
Amb	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hosp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

FECHA: 28-octubre-2024


DR./SERVICIO SOLICITANTE

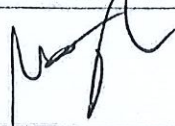

Fdo.: Dr.

ANA I SOLER RODENAS


Director Gerente



Fdo.:

RAFAEL MARTINEZ ITURBE

VºBº Director Médico

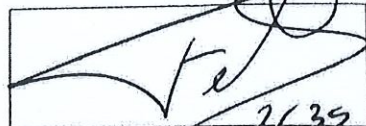

Fdo.:Dr.

TOMAS FEBLES



## Gara Fernández Hernández

---

**De:** Jose Manuel Jorge Pérez  
**Enviado el:** viernes, 8 de noviembre de 2024 15:20  
**Para:** Santiago García-Machiñena Díaz  
**CC:** Gara Fernández Hernández  
**Asunto:** RV: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur  
**Datos adjuntos:** 2024 11 08 Adaptador luer lock chemfort 823755.pdf; 2024 11 08 Adaptador jeringa chemfort 823756.pdf; 2024 11 08 Adaptador chemfort 823747.pdf

Buenas tardes,  
Santi, por favor, para asignar la persona que consideres oportuno y lleve a cabo esta SOLICITUD.

Registro Número 2024/2162 , 2163 y 2164.

Gracias.

Saludos Cordiales  
**Responsable Fungibles y Prótesis.**

---

Jose Manuel Jorge Pérez  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

---



Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud



 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Enviado:** viernes, 8 de noviembre de 2024 13:43  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>  
**Cc:** Santiago García-Machiñena Díaz <santiago.garcia@hospiten.com>  
**Asunto:** Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Buenos días,

Les envío adjuntas 3 solicitudes para la inclusión de nuevos materiales destinados al Servicio de Farmacia de **Hospiten Sur**.

Agradecería que nos informaran una vez se haya completado el proceso de alta.

Quedo a vuestra disposición para cualquier información adicional o aclaración que necesiten.

Un saludo.

---

**Ana Isabel Soler Rodenas**

Responsable Servicio de Farmacia Hospiten Sur

---



Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud




 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



**Chemfort™**  
Keeps you safe. Simply click

Closed System Transfer Device  
Reconstitution and  
Administration Components

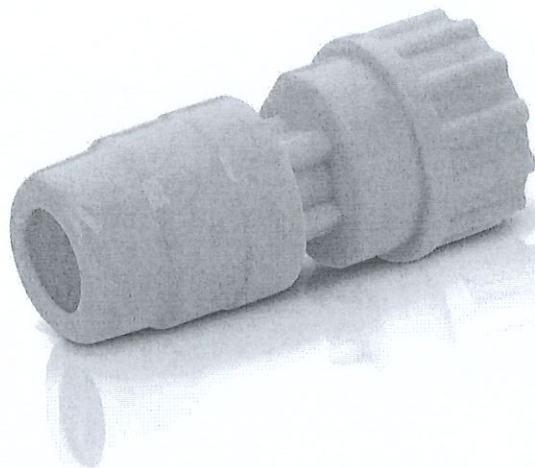

## Luer Lock Adaptor

Fits any standard female luer lock connection

### TECHNICAL DATASHEET

The Chemfort™ Luer Lock Adaptor is PVC-free and converts any standard female luer lock port (e.g. patient access port) to a safe and closed Chemfort™ connection.

Any IV line or syringe which is connected to a Chemfort™ Syringe Adaptor/Syringe Adaptor Lock should be connected to the Luer Lock Adaptor to achieve a closed administration, by either drip or push protocol. This prevents healthcare professional and patients from exposure to hazardous drugs substances upon disconnection.

The Luer Lock Adaptor can also be used for the preparation of luer lock bags, elastomeric pumps and medication cassette reservoirs for an ambulatory infusion pump.

During attachment the "click" sound indicates a safe connection and a simple pinch on the SA/SAL wings will disconnect them safely. The self-sealing elastomers prevent hazardous drug leakage and droplet formation on the outer septa surfaces.

The Chemfort™ portfolio has no known incompatibilities with hazardous drug solvents.

### Indications for Use:

Chemfort™ is a Closed System Transfer Device (CSTD) that mechanically prohibits the release of drugs, including antineoplastic and hazardous drugs, in vapor, aerosol, or liquid form during preparation, reconstitution, compounding and administration, minimizing exposure of individuals, healthcare personnel and the environment to hazardous drugs.

Chemfort™ prevents the introduction of microbial and airborne contaminants into the drug or fluid path for up to 7 days.

# Chemfort™

Keeps you safe. Simply click

Luer Lock Adaptor

## TECHNICAL DATASHEET

### Order Information

Article number / Reference	MG245250
User box quantity	100 pcs
Transport box quantity	400 pcs

### Product Characteristics

#### Product technical data

External fitting	Male luer lock connection
Fluid path volume	0.07 ml
Septum piercings	Up to ten times
Shelf life	3 years
Sterilization	Ethylene oxide

Tolerates disinfection with alcohol 70% and chlorhexidine in alcohol (5 mg/70% alcohol)

### Material Specifications

Free of PVC, DEHP and Latex. Non-pyrogenic. Free from lead, cadmium, arsenic and chrome. Meets standards and regulations with regards to the environment.

Component	Material
Housing	PET
Elastomeric sealing	Polyisoprene

### Regulation

CE 0483

FDA 510(k) Cleared under ONB product code

Disposal of components should be according to local regulations and procedures for handling of hazardous drugs

Symbols taken from ISO 15223-1:2016



Consult instructions for use



Sterilized using ethylene oxide



Non-pyrogenic



Do not re-sterilize



Do not re-use



Do not use if package is damaged



Keep dry



Keep away from sunlight



Donawa Lifescience Consulting Srl  
Piazza Albania 10,  
00153 Rome, Italy

CE 0483

**SIMPLIVIA™**

Simplivia Healthcare Ltd.  
North Industrial Zone  
P.O. Box 888  
Kiryat Shmona, Israel 1101801



[www.simplivia.com](http://www.simplivia.com)



[info@simplivia.com](mailto:info@simplivia.com)




Follow us

**SIMPLIVIA**



**Chemfort™**  
Keeps you safe. Simply click

Closed System Transfer Device  
Reconstitution and  
Administration Components

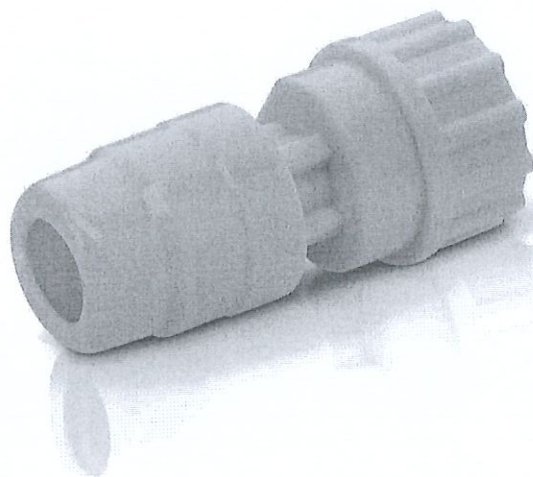

## Luer Lock Adaptor

Fits any standard female luer lock connection

### TECHNICAL DATASHEET

The Chemfort™ Luer Lock Adaptor is PVC-free and converts any standard female luer lock port (e.g. patient access port) to a safe and closed Chemfort™ connection.

Any IV line or syringe which is connected to a Chemfort™ Syringe Adaptor/Syringe Adaptor Lock should be connected to the Luer Lock Adaptor to achieve a closed administration, by either drip or push protocol. This prevents healthcare professional and patients from exposure to hazardous drugs substances upon disconnection.

The Luer Lock Adaptor can also be used for the preparation of luer lock bags, elastomeric pumps and medication cassette reservoirs for an ambulatory infusion pump.

During attachment the "click" sound indicates a safe connection and a simple pinch on the SA/SAL wings will disconnect them safely. The self-sealing elastomers prevent hazardous drug leakage and droplet formation on the outer septa surfaces.

The Chemfort™ portfolio has no known incompatibilities with hazardous drug solvents.

### Indications for Use:

Chemfort™ is a Closed System Transfer Device (CSTD) that mechanically prohibits the release of drugs, including antineoplastic and hazardous drugs, in vapor, aerosol, or liquid form during preparation, reconstitution, compounding and administration, minimizing exposure of individuals, healthcare personnel and the environment to hazardous drugs.

Chemfort™ prevents the introduction of microbial and airborne contaminants into the drug or fluid path for up to 7 days.

# Chemfort™

Keeps you safe. Simply click

Luer Lock Adaptor

## TECHNICAL DATASHEET

### Order Information

Article number / Reference	MG245250
User box quantity	100 pcs
Transport box quantity	400 pcs

### Product Characteristics

#### Product technical data

External fitting	Male luer lock connection
Fluid path volume	0.07 ml
Septum piercings	Up to ten times
Shelf life	3 years
Sterilization	Ethylene oxide

Tolerates disinfection with alcohol 70% and chlorhexidine in alcohol (5 mg/70% alcohol)

### Material Specifications

Free of PVC, DEHP and Latex. Non-pyrogenic. Free from lead, cadmium, arsenic and chrome. Meets standards and regulations with regards to the environment.

Component	Material
Housing	PET
Elastomeric sealing	Polyisoprene

### Regulation

CE 0483

FDA 510(k) Cleared under ONB product code

Disposal of components should be according to local regulations and procedures for handling of hazardous drugs

Symbols taken from ISO 15223-1:2016



Consult instructions for use



Sterilized using ethylene oxide



Non-pyrogenic



Do not re-sterilize



Do not re-use



Do not use if package is damaged



Keep dry



Keep away from sunlight



Donawa Lifescience Consulting Srl  
Piazza Albania 10,  
00153 Rome, Italy

CE0483

 SIMPLIVIA™

Simplivia Healthcare Ltd.  
North Industrial Zone  
P.O. Box 888  
Kiryat Shmona, Israel 1101801



www.simplivia.com



info@simplivia.com




Follow us

 SIMPLIVIA



**Chemfort™**  
Keeps you safe. Simply click

Closed System Transfer Device  
Reconstitution and  
Administration Components

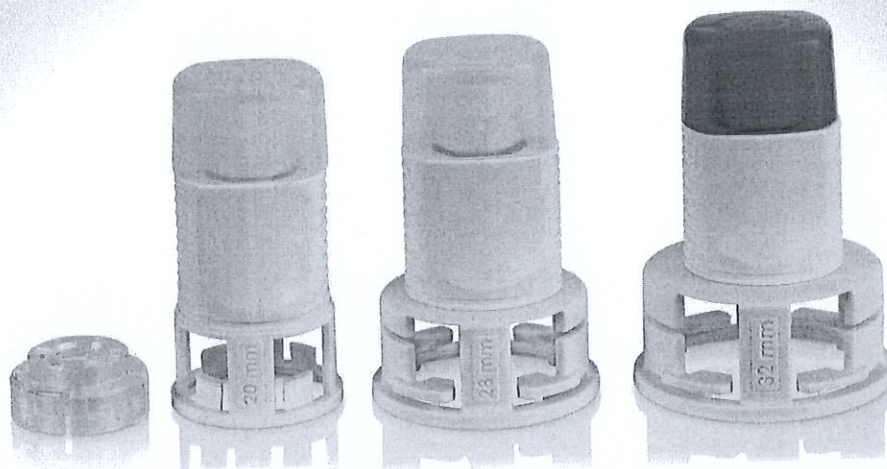

# Vial Adaptor

With Toxi-Guard® technology

## TECHNICAL DATASHEET

The Chemfort™ Vial Adaptor family is PVC-free and offers 4 sizes that firmly connect onto any standard vials, that have a cap dimension of 13 & 20 mm (ref. MG245248), 28 mm (ref. MG245266) or 32 mm (ref. MG245269).

Equipped with the Toxi-Guard® technology, an immediate pressure equilibration is ensured, reducing the extra step of pre-priming.

The Toxi-Guard® system contains a 100% activated carbon drug binding matrix (charcoal) and a 0.2 micron hydrophobic and oleophobic membrane. The membrane prevents airborne contaminants and particles from entering the drug or fluid path. The active carbon prevents the escape of cytotoxic and other hazardous drug vapors, aerosols and droplets into the environment during drug reconstitution.

Once connected to the Chemfort™ Syringe Adaptor/Syringe Adaptor Lock, a safe drug transfer is made possible from the vial to another container (e.g. a semi-rigid bottle, an infusion bag, an elastomeric pump or a medication cassette reservoir for an ambulatory infusion pump).

The intuitive design makes it easy to use: with minimal effort both Chemfort™ components can be connected and a "click" sound will indicate a safe connection. A pinch on the SA/SAL wings will disconnect the two components. The self-sealing elastomers prevent drug leakage and droplet formation on the outer septa surfaces. Also, in case of multiple-use vials, a protective cap can be used for safe storage of the vial.

The Chemfort™ portfolio has no known incompatibilities with hazardous drug solvents.

### Indications for Use:

Chemfort™ is a Closed System Transfer Device (CSTD) that mechanically prohibits the release of drugs, including antineoplastic and hazardous drugs, in vapor, aerosol, or liquid form during preparation, reconstitution, compounding and administration, minimizing exposure of individuals, healthcare personnel and the environment to hazardous drugs.

Chemfort™ prevents the introduction of microbial and airborne contaminants into the drug or fluid path for up to 7 days.



# Chemfort™

Keeps you safe. Simply click

Vial Adaptor

## TECHNICAL DATASHEET

### Order Information

	Vial Adaptor 20 mm with 13 mm Convertor	Vial Adaptor 28 mm	Vial Adaptor 32 mm
Article number / Reference	MG245248	MG245266	MG245269
User box quantity	50 pcs	20 pcs	25 pcs
Transport box quantity	200 pcs	80 pcs	100 pcs

### Product Characteristics

Product technical data			
Cap dimension of fitting vial	13 & 20 mm	28 mm	32 mm
External fitting	Tight circular grip around the neck of the vial	Tight circular grip around the neck of the vial	Tight circular grip around the neck of the vial
Spike type	2-way spike with separate air and fluid path	2-way spike with separate air and fluid path	2-way spike with separate air and fluid path
Protective cap	Yes (white)	Yes (white)	Yes (blue)
Fluid path volume	0.15 ml	0.15 ml	0.15 ml
Membrane pore size	0.2 micron	0.2 micron	0.2 micron
Septum piercings	Up to ten times	Up to ten times	Up to ten times
Shelf life	3 years	3 years	3 years
Sterilization	Ethylene Oxide	Ethylene Oxide	Ethylene Oxide

Tolerates disinfection with alcohol 70% and chlorhexidine in alcohol (5 mg/70% alcohol)

### Material Specifications

Component	Material	Material	Material
Spike	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Injection point cover	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene
Elastomeric sealing	Polyisoprene	Polyisoprene	Polyisoprene
13 mm convertor	PET		
Protective cap	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
0.2 micron membrane	Acrylic co-polymer	Acrylic co-polymer	Acrylic co-polymer
Charcoal filter	Charcoal Zorflex®	Charcoal Zorflex®	Charcoal Zorflex®
Filter base	Polypropylene	Polypropylene	Polypropylene
Filter cover	PET	PET	PET

Free of PVC, DEHP and Latex. Non-Pyrogenic. Free from lead, cadmium, arsenic and chrome. Meets standards and regulations with regards to the environment

### Regulation

CE 0483
FDA 510(k) Cleared under ONB product code
Disposal of components should be according to local regulations and procedures for handling of hazardous drugs

Symbols taken from ISO 15223-1:2016



Consult instructions for use



Sterilized using ethylene oxide



Non-pyrogenic



Do not re-sterilize



Do not re-use




Do not use if package is damaged



Keep dry



Keep away from sunlight

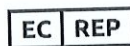

Donawa Lifescience Consulting Srl  
Piazza Albania 10,  
00153 Rome, Italy

CE0483



Simplivia Healthcare Ltd.  
North Industrial Zone  
P.O. Box 888  
Kiryat Shmona, Israel 1101801



www.simplivia.com



info@simplivia.com



Follow us





## Gara Fernández Hernández

**De:** Rafael Martínez Iturbe  
**Enviado el:** miércoles, 27 de noviembre de 2024 11:32  
**Para:** Gara Fernández Hernández  
**CC:** Angel Martín; Daniel Manso; Jose Manuel Jorge Pérez; Ana Isabel Soler Rodenas  
**Asunto:** RE: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

ok

Un saludo,

---

Rafael Martínez Iturbe  
Director Gerente Hospiten Sur

---



Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado:** miércoles, 27 de noviembre de 2024 10:00  
**Para:** Rafael Martínez Iturbe <rafael.martinez@hospiten.com>  
**Cc:** Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Asunto:** RE: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Hola buenos días

Salvo error por nuestra parte no hemos recibido conformidad para poder ampliar al sur los siguientes materiales solicitados por el servicio de farmacia o si por el contrario queda desestimada, para nosotros poder dar por finalizada la gestión .

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR				PROPUESTA INCLUI	
PROVEEDOR				BBRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNID/
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

Saludos

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** viernes, 22 de noviembre de 2024 8:48  
**Para:** Rafael Martínez Iturbe <rafael.martinez@hospiten.com>  
**CC:** Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Hola buenos días Rafael


Salvo error por mi parte no hemos recibido la conformidad para poder ampliar al sur los siguientes materiales solicitados por el servicio de farmacia, o si por el contrario queda desestimada, para nosotros poder dar por finalizada la gestión.



Centro Solicitante: HOSPITEN SUR				PROPUESTA INCLUI	
PROVEEDOR				BBRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNID/
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

Saludos

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department

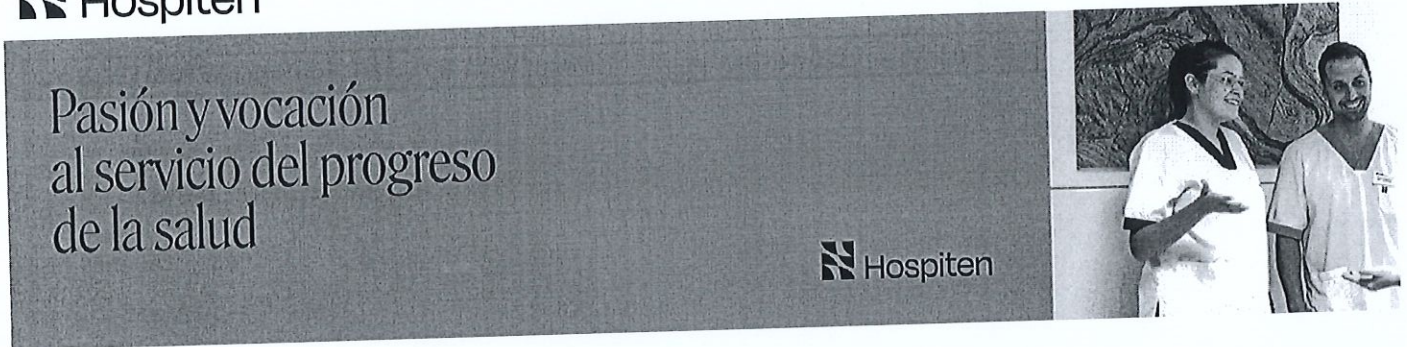

⚠ Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** martes, 19 de noviembre de 2024 8:22  
**Para:** Rafael Martínez Iturbe <rafael.martinez@hospiten.com>  
**CC:** Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Asunto:** RE: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Hola buenos dias

Salvo error por nuestra parte no hemos recibido respuesta a la siguiente gestión , solicitada por el servicio de Farmacia del centro

ampliación de los siguientes materiales



Centro Solicitante: HOSPITEN SUR				PROPUESTA INCLUI	
PROVEEDOR				BBRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNID/
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

Quedamos a la espera de tu conformidad para proceder a su ampliación, o si por el contrario queda desestimada para poder dar por finalizada dicha gestión

saludos

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

De: Gara Fernández Hernández <[gara.fernandez@hospiten.com](mailto:gara.fernandez@hospiten.com)>  
 Enviado el: jueves, 14 de noviembre de 2024 15:34  
 Para: Rafael Martínez Iturbe <[rafael.martinez@hospiten.com](mailto:rafael.martinez@hospiten.com)>  
 CC: Angel Martín <[angel.martin@hospiten.com](mailto:angel.martin@hospiten.com)>; Daniel Manso <[daniel.manso@hospiten.com](mailto:daniel.manso@hospiten.com)>; Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>; Ana Isabel Soler Rodenas <[ana.soler@hospiten.com](mailto:ana.soler@hospiten.com)>  
 Asunto: RE: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Hola buenas tardes


Salvo error por mi parte no hemos recibido respuesta para la ampliación de los siguientes códigos sap

Saludos





Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud

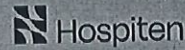

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

**De:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**Enviado el:** martes, 12 de noviembre de 2024 9:12  
**Para:** Rafael Martínez Iturbe <rafael.martinez@hospiten.com>  
**CC:** Tomás Febles Palenzuela <tomas.febles@hospiten.com>; Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Asunto:** RV: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Hola buenos días

Desde el servicio de farmacia nos informa de que requieren la ampliación de los siguientes materiales

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR				PROPUESTA INCLUI	
PROVEEDOR				BBRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDA
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

Quedamos a la espera de tu conformidad para proceder a su ampliación.

Saludos

Gara Fernández Hernández  
Dpto. Gestión y Adjudicación de Compras / Purchasing Department



Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.

---

**De:** Ana Isabel Soler Rodenas <[ana.soler@hospiten.com](mailto:ana.soler@hospiten.com)>  
**Enviado:** viernes, 8 de noviembre de 2024 13:43  
**Para:** Jose Manuel Jorge Pérez <[josemanuel.jorge@hospiten.com](mailto:josemanuel.jorge@hospiten.com)>  
**Cc:** Santiago García-Machifena Díaz <[santiago.garcia@hospiten.com](mailto:santiago.garcia@hospiten.com)>  
**Asunto:** Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

Buenos días,

Les envío adjuntas 3 solicitudes para la inclusión de nuevos materiales destinados al Servicio de Farmacia de **Hospiten Sur**.

Agradecería que nos informaran una vez se haya completado el proceso de alta.

Quedo a vuestra disposición para cualquier información adicional o aclaración que necesiten.

Un saludo.

---

**Ana Isabel Soler Rodenas**  
Responsable Servicio de Farmacia Hospiten Sur

Pasión y vocación  
al servicio del progreso  
de la salud



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



## Gara Fernández Hernández

**De:** Gara Fernández Hernández  
**Enviado el:** miércoles, 27 de noviembre de 2024 12:47  
**Para:** Lorenzo Galán  
**CC:** Angel Martín; Daniel Manso; Jose Manuel Jorge Pérez  
**Asunto:** RV: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur  
**Datos adjuntos:** SOLICITUD DE AMPLIACION MATERIAL BRAUN.xlsx

Hola buenos días

En el día de hoy se ha dado autorización para la ampliación del siguiente material de braun medical para hospiten sur

Almacen: uvi

Centro Solicitante: HOSPITEN SUR				PROPUESTA INCLUSIVA	
PROVEEDOR				BBRAUN MEDICAL	
				COSTE	
SAP	DENOMINACION	RFA	PREST	CAJA	UNIDAD
823755	ADAPTADOR LUER LOCK CHEMFORT	MG-245250	100	155,00 €	
823756	ADAPTADOR DE JERINGA CHEMFORT	MG-245277	50	200,00 €	
823747	ADAPTADOR VIAL CHEMFORT 13/20MM	MG-245248	50	247,50 €	
VIGENCIA TARIFA 31/12/2024					
PRECIOS SIN EL 3% DE IGIC					

El Centro Hospitalario se responsabilizará que dicho material sea facturado al paciente y/o Entidad Aseguradora Pública o Privada, con especial atención a pacientes de Entidades Aseguradoras las cuales requieran consentimiento y autorización previa antes de su uso o aplicación.

Si el paciente es asegurado de Entidades quienes tienen acuerdos con proveedores, previamente la Dirección o Administración del Hospital deberá verificar las marcas y/o proveedores homologados por la Entidad. En caso de que el paciente pertenezca a Entidades Aseguradoras Públicas o Privadas con quienes tengamos "Tarifa de Prestación Cerrada", antes de dar conformidad la Dirección del Hospital deberá analizar el coste del material junto con la tarifa de prestación.

Saludos

**De:** Rafael Martínez Iturbe <rafael.martinez@hospiten.com>  
**Enviado el:** miércoles, 27 de noviembre de 2024 11:32  
**Para:** Gara Fernández Hernández <gara.fernandez@hospiten.com>  
**CC:** Angel Martín <angel.martin@hospiten.com>; Daniel Manso <daniel.manso@hospiten.com>; Jose Manuel Jorge Pérez <josemanuel.jorge@hospiten.com>; Ana Isabel Soler Rodenas <ana.soler@hospiten.com>  
**Asunto:** RE: Solicitud alta material sanitario - Hospiten Sur

ok